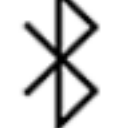


(1) Совместимые ОС Версия:

-  1. Android 4.4 и выше
-  2. IOS 8.0 и выше
-  3. BT 4.0

(2) Подготовка к использованию

Пожалуйста, убедитесь, что устройство полностью заряжено перед первым использованием.

Передняя
сторона



Задняя
сторона



(3) Отсканируйте QR-код для загрузки приложения "LEFUN HEALTH".



Можно загрузить приложение "LEFUN HEALTH" из магазина APP store или Android market.

(4) Подключение браслета.

Сначала нажмите сенсорную кнопку, чтобы включить браслет. Убедитесь, что на смартфоне включен Bluetooth. Откройте приложение "LEFUN HEALTH", нажмите в верхнем левом углу, войдите в СПИСОК ФУНКЦИЙ ПРИЛОЖЕНИЯ, затем нажмите значок приложения - нажмите "Поиск", выберите нужный браслет по MAC-номеру, в "Запрос Bluetooth-соединения", нажмите "Пара".

2



(5) Работа браслета

Когда браслет успешно подключен к телефону, браслет синхронизирует время и дату телефона. Приложение синхронизирует данные браслета, данные мониторинга сердечного ритма, данные артериального давления. Короткое нажатие сенсорной кнопки браслета для переключения функции. Длительное нажатие сенсорной кнопки для включения/выключения.





(6) Отображение интерфейса

Главный экран: Показывает время, дату, заряд батареи и прочее;

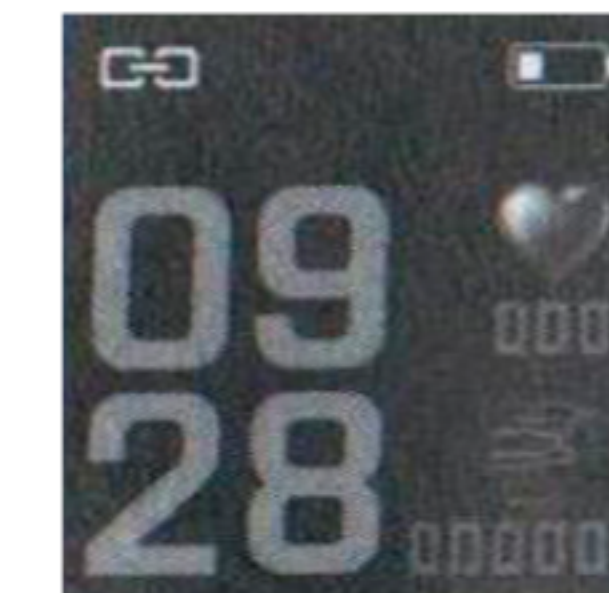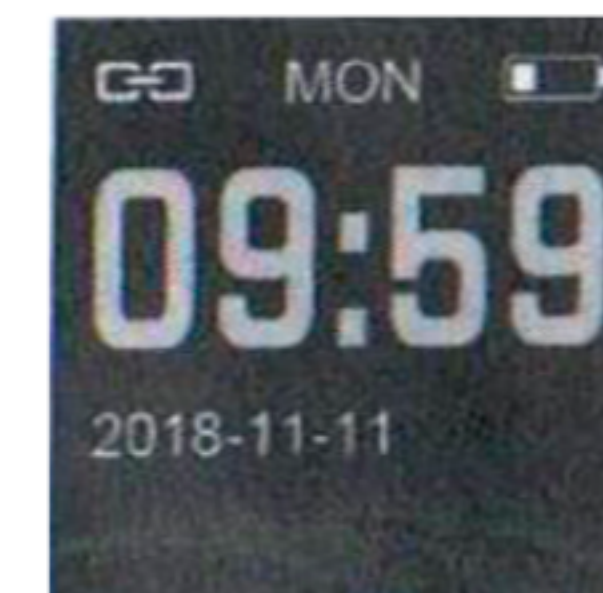

4

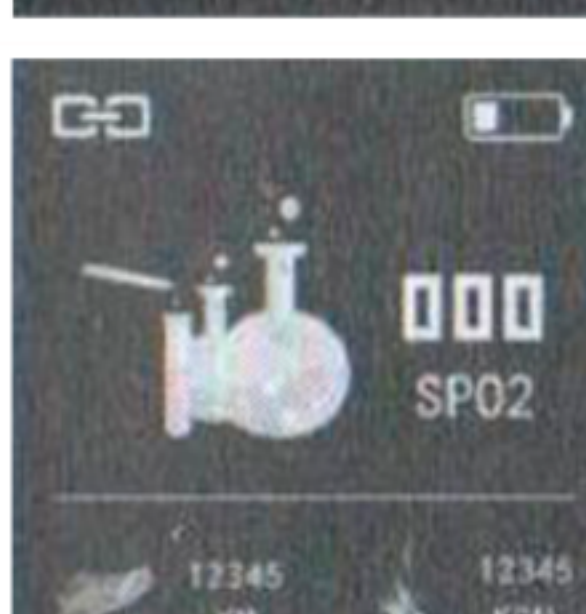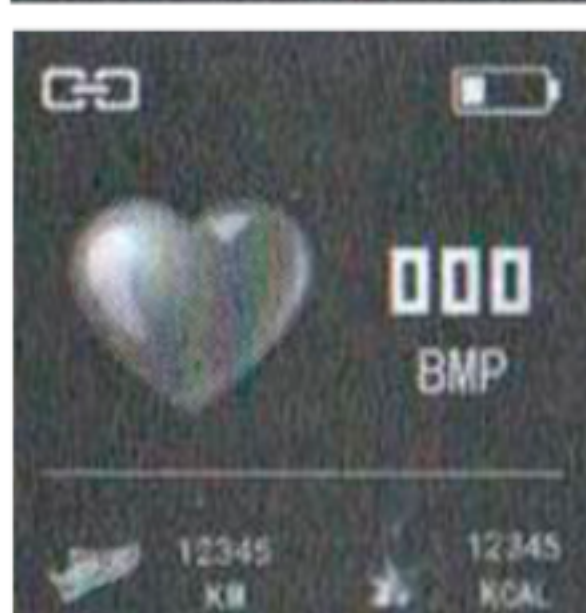


- Шагомер: круглосуточно записывает данные на браслет. Можно очистить данные браслета в 24:00. Возможна проверка данных из приложения;

- Упражнение: посчитайте свое ежедневное время тренировки. Круглосуточная запись, вы также можете просмотреть историю в приложении;

- Монитор сердечного ритма: автоматически отображает частоту сердечных сокращений, когда функция переключается на частоту сердечных сокращений, или вы нажимаете на монитор сердечного ритма в приложении. Данные сохраняются в приложении.

- Тест SPO2: автоматически измеряет частоту вращения spO2, когда функция переключается на частоту сердечных сокращений, или можете нажать монитор частоты сердечных сокращений в приложении. Данные сохраняются в приложении.

5

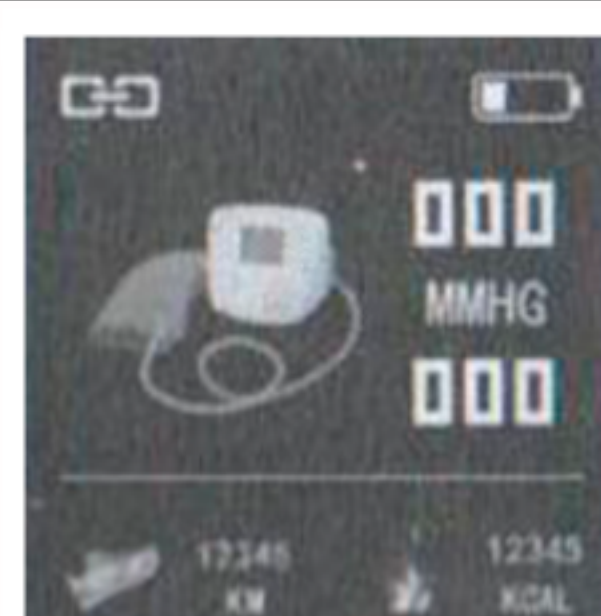

- Артериальное давление: автоматически измеряет кровяное давление, когда функция переключается на частоту сердечных сокращений, или можете нажать на пульсометр в приложении, данные будут сохранены в приложении.

- Smart будильник: найдите «Smart Часы» в приложении, установите время, также можете установить режим повтора и нажмите кнопку «Подтвердить», чтобы сохранить настройки, браслет будет вибрировать, в заданное время.

- Монитор сна: Автоматическая запись вашего состояния сна с анализом глубокого сна и легких часов сна, данные сохраняются в приложении,

- Сидячее положение: откройте функцию в приложении и установите продолжительность, браслет будет вибрировать в заданный момент.

- Напоминание о питье: Откройте функцию в приложении и установите время, браслет будет вибрировать

- Анти-потеря: Откройте функцию в приложении, браслет будет вибрировать, когда телефон потеряется.

3

6

- Напоминание о сообщении: откройте функцию в приложении, браслет будет вибрировать, когда на телефон придет новое сообщение (SMS, QQ Facebook, Twitter WhatsApp, Wechat)

- Напоминание о вызове: Откройте функцию в приложении, браслет будет вибрировать, когда на телефон придет звонок

- Встряхните браслет, чтобы сделать снимок: откройте функцию в приложении, затем нажмите «Встряхнуть», чтобы сделать снимок», войдите в камеру, встряхните браслет, чтобы подтвердить. (Убедитесь, что выбрана настройка мобильного телефона: разрешить приложению фотографировать и сохранить фотографию).

- Найти браслет: нажмите на функцию в приложении, браслет начнет вибрировать.

- Восстановить заводские настройки: установите время предыдущего дня в мобильном приложении. Браслет можно очистить, синхронизировав предыдущий день;

* Компания оставляет за собой право вносить изменения в содержание спецификации без предварительного уведомления.